


## 全国どこへでもdirectに、そしてsafetyにお届けします

トラブルには責任を持って対処します

製品出荷にあたっては細心の注意を払っております。  
万が一、運送中のアクシデントによりお手元に届いた製品に破損などのトラブルがあった場合は、責任を持って対処します。

本社倉庫と北海道倉庫から  
翌日納品可能

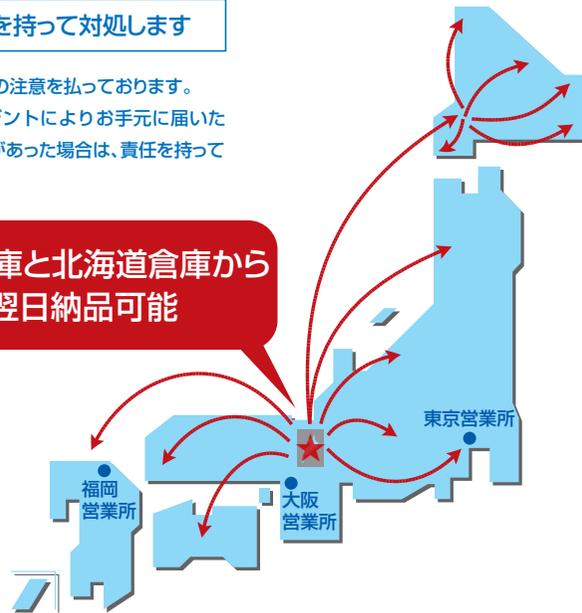

アテクトでは弊社カタログ記載品以外の商品も取り扱っております。  
小ロット販売やお客様のニーズに合わせた数量での販売も可能です。  
是非、お問い合わせください。

また、HPでもお困りごとなどお問い合わせいただけますので  
ご活用ください。

アテクト 衛生検査 **検索**

高品質・低コストの製品をお客様のお手元に直接お届け致します。

ご注文専用 フリーダイヤルFAX ☎ 0120-82-4929

カスタマーセンター フリーダイヤルTEL ☎ 0120-812-880

**atect** 株式会社 **アテクト**

滋賀本社 〒527-0082 滋賀県東近江市上羽田町3275番地1  
TEL 0748-20-3535 FAX 0748-25-7171  
東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-16-3 プリリアンビル2階A号室  
TEL 03-6910-3114  
大阪営業所 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島2-8-6 新大阪駅前ビル 1002号  
TEL 06-4862-5025  
福岡営業所 〒802-0081 福岡県北九州市小倉北区紺屋町11-23  
TEL 093-512-3130  
URL <https://www.atect.co.jp> E-mail [biosales@atect.co.jp](mailto:biosales@atect.co.jp)

customer  
direct

vol.21

お客様の声を反映させた機能重視のオリジナルブランド

Full-Steri

## 衛生管理用品カタログ

一貫した直接販売体制だからこそできる、リーズナブルな機能性重視の商品を生産。  
ニーズをしっかりと形にし、お客様の元へ確実にお届けします。

### 目次

- P1~P3 TOPICS  
各種検査代行サービス・デリバリー検査・  
微生物同定サービス・衛生管理指導・教育サービス  
通話無料カスタマーセンター開設  
ホームページ上で買い物が可能となりました
- P4~P5  
アテクトの新商品
- P6~P7  
検査必需品
- P8~P11  
調製済の生培地・液体培地
- P11  
ふき取り検査用器具
- P12  
検体前処理用希釈液・緩衝液
- P12~P15  
検体の採取・保存、検査後の廃棄用必需品
- P15~P16  
その他検査必需品
- P17  
サルモネラ、黄色ブドウ球菌検査用緩衝ペプトン水
- P18  
臨床検査、検便検査用調製済培地

- ※ **動画** マークはHPより、商品の使い方をご覧頂けます
- ※ **New** マークは新商品です
- ※ **PTO** マークはPack To Order  
お客様のご要望に応じて包装単位を変更できます
- ※ **詰合せ** 10枚単位でお客様のご要望に応じて  
各種生培地を詰め合わせが可能です

**atect**  
株式会社 **アテクト**



# Topic! ① 各種検査代行サービス

～検査室が無い、コストがかけられない、検査方法が分からないお客様 アテクトに検査をお任せ下さい～

微生物検査の精度を客観的に確かめる為の「クロスチェック」にご活用頂けます!

年間14,000事業所以上との取引実績がある弊社が、登録衛生検査所と提携し検査代行を行います。

## 登録衛生検査所の証明書発行

登録衛生検査所がお客様の検体(食材・食品等)を責任をもって検査いたします。

## 充実のサポート体制

宅配便で検体を受付けるため、全国のお客様にご利用いただけます。


また、ご不明点は電話やメールにてお答えいたします。

迅速性 気になる検査結果をスピーディーにご報告いたします。

## 〈検査代行サービスラインナップ〉

検査種類	検査項目	価格表			
■食品微生物検査	一般生菌・大腸菌・大腸菌群・黄色ブドウ球菌・サルモネラ・緑膿菌・真菌(カビ・酵母)など	1菌種	¥ 2,000-	4菌種	¥ 8,000-
		2菌種	¥ 4,000-	真菌	¥ 3,000-
		3菌種	¥ 6,000-	酵母	¥ 6,000-
■栄養成分分析	義務表示5項目 (エネルギー・タンパク質・脂質・炭水化物・ナトリウム(食塩相当量)) 義務表示5項目+糖質・食物繊維	義務行事5項目		¥ 14,000-	
		義務表示5項目+糖質・食物繊維		¥ 42,000-	
■アレルギー検査	義務表示7項目(卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに) 義務表示7項目+ヒスタミン・その他のアレルギー物質	義務表示1項目(イムノクロマト法)		¥ 6,000-	
		ヒスタミン		¥ 8,000-	
■異物検査	有機物・無機物・虫の鑑別	有機物・無機物・虫の鑑別		¥ 20,000-	
		有機物・無機物・虫の鑑別		¥ 10,000-	
				1項目追加ごと	
■腸内細菌検査	3菌種 (赤痢菌・サルモネラ(腸チフス・パラチフス)・O-157)	3菌種(赤痢菌・サルモネラ(腸チフス・パラチフス))O-157		¥ 700-	
				1人あたり	
■水質検査	11項目・26項目・51項目 (一般生菌・大腸菌・カドミウム・水銀等)	水質検査(飲料水) 11項目		¥ 12,000-	
		水質検査(飲料水) 16項目		¥ 36,000-	
		水質検査(飲料水) 51項目		¥160,000-	
■ノロウイルス検査	RT-PCR法(高感度測定) イムノクロマト法(簡易法)	RT-PCR法(高感度測定)		¥ 8,000-	
		イムノクロマト法(簡易法)		¥ 6,000-	

## 検査の流れ

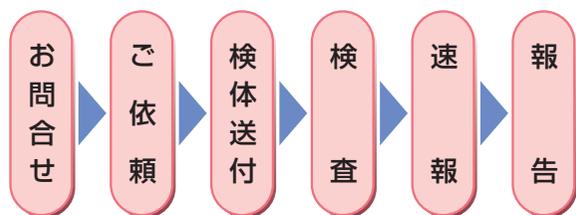

# Topic! NEW ② デリバリー検査(表面付着菌数測定)

～日々の衛生管理をアテクトにお任せ下さい～

お客様に代わって表面付着菌数を測定するサービスです。弊社から検査キットを送付しますので、お客様にて検査したい箇所をスタンプして下さい。その後返送いただき結果を報告いたします。設備・検査器具が不要で簡単に検査ができ、衛生管理の改善や意識向上に役立てていただけます。

## 料金

※下記以外の菌種も承りますのでお尋ね下さい

	一般生菌	大腸菌群	黄色ブドウ球菌	サルモネラ	価格
2菌種セット	10枚	10枚			¥18,000-
	20枚	20枚			¥23,000-
3菌種セット	10枚	10枚	10枚		¥22,000-
	20枚	20枚	20枚		¥26,000-
4菌種セット	10枚	10枚	10枚	10枚	¥28,000-
	20枚	20枚	20枚	20枚	¥32,000-



# Topic! ③ DNA解析による微生物同定サービス

～日本薬局方記載のプライマーで解析～

## 微生物同定

- 培地上に見慣れないコロニーが発育したのでどのような菌か知りたい。
- コンタミネーションによるクリーム品の菌を特定して欲しい。
- 最短(超特急便)2日で回答します。(別料金)

## 解析

品番	依頼内容	納期	価格
091-00007	細菌 or 真菌	検体到着後、5営業日	¥16,500-
091-00009	不明		¥22,000-

サンプルの状態によって納期が前後する場合がございます。サンプル送付方法: 寒天培地に検体を純培養し、シャーレの周りをテープなどで密封し冷蔵(クール便)でお送り下さい。



肉種DNA判別試験も対応いたします(牛・豚・鶏・馬・羊)。

肉種DNA判別試験とは、加工食品や原材料で牛、豚、鶏などの表示以外の肉種が入っていないかを調べる為の検査です。

# Topic! ④ 衛生管理指導・教育サービス

～お客様へ微生物検査ノウハウ等の技術サポート～

食の安全性や、品質・衛生管理に対する消費者の意識が高まる昨今、アテクトはお客様への衛生管理指導・教育サービスを行っています。衛生管理の現場に配属されたばかりの担当者や、これから細菌検査を実施する企業様などに必須項目の食品細菌検査の実践をまじえてノウハウをご提供致します。

お悩み【例1】	お悩み【例2】	お悩み【例3】	お悩み【例4】
これから細菌検査を実施する。	検査はしないとイケないが、ノウハウがよくわからない。	細菌検査専門スタッフがない。	細菌検査は実施しているが、もう少し高度な検査をしたい。

このようなお悩みをお持ちのお客様のチカラになります。



ご注文は  
右記にて承ります

FAX ☎ 0120-82-4929  
TEL ☎ 0120-812-880

MAIL biosales@atect.co.jp

アテクト 衛生検査 検索

ご注文は  
右記にて承ります

FAX ☎ 0120-82-4929  
TEL ☎ 0120-812-880

MAIL biosales@atect.co.jp

アテクト 衛生検査 検索

Topic!  
⑤

## 通話料無料の顧客センター開設

～より一層のサービス向上を目指して参ります～

2019年7月より、  
通話料無料の顧客センターを  
開設いたしました。

**0120-812-880**

までお気軽に問合せ下さい。



Topic!  
⑥

## ホームページ上でお買い物が可能となりました

～お客様専用のIDとパスワードを発行致します～

IDとパスワードでお客様専用ページへ  
ログインしていただき、ネット上からの  
ご注文が可能です。

またホームページ上限定のお得なご案内  
なども随時掲載しております。

ご希望の方は、TEL(フリーダイヤル)、  
FAX、MAILでお気軽にお問合せ下さい。

**TEL : 0120-812-880**

**FAX : 0120-82-4929**

MAIL :  
**biosales@atect.co.jp**



## アテクトの新商品

New

### 滅菌検液袋 遮光タイプ1200ml



- 特徴**
- 5層フィルムでバリアー性あり湿度対策可能
  - アルミ素材で遮光性機能あり
  - ヒートシール対応袋で密封が可能
  - 自立式袋で操作性に優れている
  - 丸めて廃棄でき、ゴミを削減
  - 10枚/袋など必要な枚数で梱包可能

- 仕様**
- 滅菌：ガンマ線滅菌  
材質：ポリエステル・ポリエチレン・アルミ  
サイズ：18(幅)cm × 26(深)cm

品番	品名	入数	販売価格
061-21302	滅菌検液袋 遮光タイプ 1200ml	50枚/袋	¥8,800- (@¥176-)

New

### 滅菌検食袋 MARK-H(サンプリングバッグ)



- 特徴**
- 記入できる箇所を追加したことにより、透明箇所に記入して漏れまわりのリスクを軽減と検体名が見やすくなり、作業性と効率アップします!

- 仕様**
- 滅菌：ガンマ線滅菌  
材質：ポリエチレン  
サイズ：17(幅)cm × 24(深)cm

品番	品名	入数	販売価格
061-21205	滅菌検食袋 MARK-H	1,000枚(100枚包装)	¥17,000- (@¥17-)

New

### 日本薬局方対応 力価試験用培地



円筒平板法抗生物質の力価試験用培地  
日本薬局方抗生物質の微生物学的力価試験法の円筒平板法及び医薬品各条に収載の各種培地をお客様のご要望に応じて作製致します  
試験菌移植用寒天培地、基層用寒天培地、種層用寒天培地がございます  
ご指定の抗生物質に合わせて作製しますので、お問い合わせ下さい

弊社作製実績  
湯せん培地100ml 試験菌移植用寒天培地  
生培地 基層用寒天培地20ml  
湯せん培地100ml 種層用寒天

品番	品名	入数	販売価格
3205	湯せん培地100ml 試験菌移植用寒天培地	100ml×10本	¥16,500- (@¥1,650-)



ご注文は  
右記にて承ります

FAX ☎ 0120-82-4929  
TEL ☎ 0120-812-880

MAIL biosales@atect.co.jp

アテクト 衛生検査 検索

ご注文は  
右記にて承ります

FAX ☎ 0120-82-4929  
TEL ☎ 0120-812-880


MAIL biosales@atect.co.jp

アテクト 衛生検査 検索





湯せん培地 + 浅型シャーレSLEセット

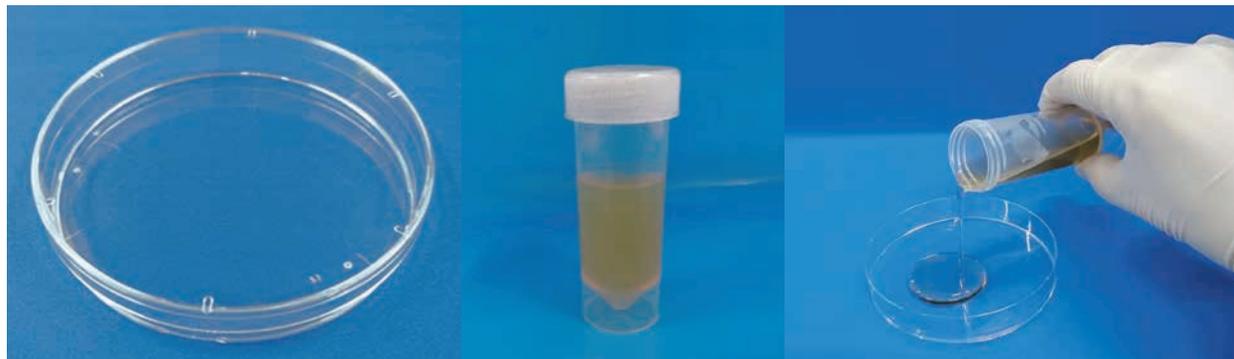

湯せん培地と浅型シャーレSLEのセット販売です

試料液を容器に入れ混和し、シャーレに注いで下さい

**特徴** 湯せん培地1本にシャーレ1枚分の培地を充填しています  
容器に直接試料液を添加し、混和できるため混和作業が簡単に行え、手技による検査結果の違いを低減でき、作業効率も上がります

品番	品名	入数	販売価格
055-13210	湯せん培地20ml+浅型シャーレSLE 標準寒天培地	浅型シャーレSLE 100枚 湯せん培地20ml 100本	¥27,500- (@¥275-)
055-13216	湯せん培地20ml+浅型シャーレSLE SCD寒天培地		
055-13225	湯せん培地20ml+浅型シャーレSLE SCDLP寒天培地		
055-13215	湯せん培地20ml+浅型シャーレSLE サブロー寒天培地		
055-13224	湯せん培地20ml+浅型シャーレSLE CP加サブロー寒天培地		
055-13213	湯せん培地20ml+浅型シャーレSLE CP加ポテトデキストロース寒天培地		
055-13217	湯せん培地20ml+浅型シャーレSLE R2A寒天培地		
055-13209	湯せん培地20ml+浅型シャーレSLE GPLP寒天培地		



2倍濃度LB液体培地



大腸菌群用 2倍濃度LB液体培地です  
水雪、清涼飲料水をお取り扱い企業様は、2倍濃度LB液体培地の使用が食品衛生法に規定されています  
試料液10mlを加えてご使用下さい

**特徴** ダラム管入り、クリア容器の為、ガス捕集やにごりの確認が容易です

**仕様** 材質 本体：ポリプロピレン  
キャップ：ポリエチレン  
ダラム管：ポリカーボネート

品番	品名	入数	販売価格
053-12414	2倍濃度LB液体培地	100本	¥50,600- (@¥506-)


ディスポシャーレ

**特徴** 持ちやすく、使い易いシャーレです  
リップを設け、重ねた際に安定します。リップにくぼみがあり、本体と蓋がくっつきにくい構造です  
また、自動分注機用(オートシャーレ)もございます

**仕様** 滅菌：電子線滅菌 材質：ポリスチレン

品番	品名	サイズ	入数	販売価格
1 011-70101	φ86シャーレ	直径8.6cm×1.35cm	600枚(10枚包装)	¥10,200- (@¥17-)
2 011-10223	浅型シャーレ	直径9cm×1.5cm	500枚(10枚包装)	¥ 8,500- (@¥17-)
3 011-50209	深型シャーレ	直径9cm×2.0cm	500枚(20枚包装)	¥ 8,000- (@¥16-)
4 011-20201	2分割シャーレ	直径6cm×1.5cm	500枚(10枚包装)	¥10,000- (@¥20-)
5 011-30201	3分割シャーレ	直径9cm×1.5cm	500枚(10枚包装)	¥10,500- (@¥21-)
6 011-40201	4分割シャーレ			¥11,000- (@¥22-)

箱の大きさ 浅型シャーレ：48cm×48cm×37cm  
深型シャーレ：48cm×48cm×42cm  
φ86シャーレ：35cm×45cm×48cm  
φ60シャーレ：31cm×31cm×34cm

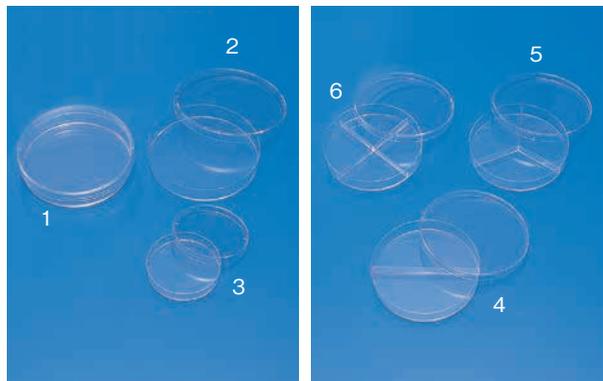

ディスポスプーン



**特徴** 1本ずつの個包装です  
サンプルの無菌的採取に最適です  
持ち手部分が長く、汚染が抑えられます

**仕様** 滅菌：EOG滅菌  
材質：ポリスチレン  
サイズ：16cm×3.5cm

品番	品名	入数	販売価格
061-32001	ディスポスプーン	500本	¥ 47,000- (@ ¥94-)

箱の大きさ 28.5cm×45.5cm×36.5cm

攪拌用 多機能スパチュラ



**特徴** 両端に攪拌部と匙があり、匙は約0.2g(砂糖)が採取できます  
全長は20cmで、持ち手はシボ加工で持ち易くなっております

◆他形状もございます。  
お問い合わせ下さい

品番	品名	入数	販売価格
061-00001	多機能スパチュラ	2,000本	¥ 30,000- (@ ¥15-)

PTO 滅菌済みディスポスプーン(多機能タイプ)



**特徴** 両サイドに匙があり、4mlと2mlが計量可能です  
柄の部分に10cmのスケール機能付です  
お好みの本数で梱包いたします。(別途お見積り致します)  
Y線滅菌済みで個包装の為安心してご使用頂けます。

**仕様** 滅菌：ガンマ線滅菌  
材質：ポリスチレン  
サイズ：20cm

品番	品名	入数	販売価格
061-32003	滅菌済みディスポスプーン(多機能タイプ)	200本	15,400- (@¥77-)

アテクトの粉末培地

**特徴** 容器の口が広く作業が容易です  
◆お試し用サンプル有(200ml用)



品番	品名	容量	販売価格
071-00001	標準寒天培地	500g	¥ 9,680-
071-00002	デソキシコレート寒天培地	500g	
071-00003	ポテトデキストロース寒天培地	450g	
071-00004	マンニット食塩寒天培地	500g	

標準寒天培地 500g

1000mlあたり 23.5g  
●組成  
ペプトン：5.0g  
酵母エキス：2.5g  
ブドウ糖：1.0g  
寒天：15.0g  
pH 7.0±0.2

ポテトデキストロース寒天培地 450g

1000mlあたり 39.0g  
●組成  
ジャガイモデンプン：4.0g  
デキストロース：20.0g  
寒天：15.0g  
pH 5.6±0.2

デソキシコレート寒天培地 500g

1000mlあたり 45.0g  
●組成  
ペプトン：10.0g  
乳糖：10.0g  
塩化ナトリウム：5.0g  
クエン酸鉄：1.0g  
クエン酸ナトリウム：1.0g  
デソキシコール酸ナトリウム：1.0g  
ニュートラルレッド：0.033g  
リン酸水素カリウム：2.0g  
寒天：15.0g  
pH 7.3±0.2

マンニット食塩寒天培地 500g

1000mlあたり 111.0g  
●組成  
カゼイン-スイ消化ペプトン：5.0g  
動物組織-ペプシン消化ペプトン：5.0g  
肉エキス：1.0g  
塩化ナトリウム：75.0g  
D-マンニトール：10.0g  
フェノールレッド：0.025g  
寒天：15.0g  
pH 7.4±0.2



ご注文は  
右記にて承ります

FAX ☎ 0120-82-4929  
TEL ☎ 0120-812-880

MAIL biosales@atect.co.jp

アテクト 衛生検査 検索



ご注文は  
右記にて承ります

FAX ☎ 0120-82-4929  
TEL ☎ 0120-812-880

MAIL biosales@atect.co.jp

アテクト 衛生検査 検索

精製水



**特徴** JIS規格 A3クラス  
ワンウェイ容器入り  
逆浸透膜(RO)とイオン交換樹脂で  
精製しています

**ご使用例** ①培地の作製用精製水として  
②化学分析用の精製水として  
③希釈用の精製水として

**仕様** 材質:軟質ポリエチレン  
滅菌:無滅菌  
◆滅菌精製水も対応いたします

品番	品名	容量	販売価格
051-00001	精製水	20L×1箱	¥ 2,360-
051-00005	精製水	5L×1箱	¥ 968-
051-00009	精製水コック	1個	¥ 187-

※精製水20L 2箱よりご注文可能  
※精製水5L 別途送料 (1箱につき)  
箱の大きさ 精製水20L: 30cm×30cm×30cm  
精製水5L: 20cm×20cm×20cm

アテクトのEO液

**特徴** 卵黄液に代わり、オートクレーブ可能なマンニト食塩寒天培地用の添加剤です  
黄色ブドウ球菌の卵黄反応が見やすくなります  
1本で25枚の生培地を作製できます

**仕様** 容量: 50ml/1本  
材質: (本体)ガラス  
(キャップ)ポリプロピレン

**使用上の注意** 必ずオートクレーブ前に添加してください  
添加量は培地量の10%です  
オートクレーブ後、泡が発生しやすいのでゆっくりと培地を攪拌してください



品番	品名	入数	販売価格
053-14002	アテクトのEO液	2本	¥2,420- (@¥1,210-)

※1~2箱発送時 別途送料 3箱以上発送時 送料弊社負担  
※使用期限: 製造日より6ヶ月(外箱に記載)、冷蔵保存(4℃~8℃)

無リンアルカリ性洗剤 インパクトA



**特徴** 油脂、タンパク質、マジックインキの除去に最適  
減容ボトルなので小さく折りたたんで廃棄  
できます

**使用方法** 浸漬洗浄の場合 水1Lに10ml加える  
超音波洗浄の場合 水1Lに5ml加える

品番	品名	入数	販売価格
052-10201	インパクトA	2kg×4本	¥10,892- (@¥2,723-)
052-11101	インパクトA 20kg	20kg×1個	¥16,335-

箱の大きさ アルカリ性洗剤インパクトA 2kg×4本 : 21cm×27cm×22cm  
アルカリ性洗剤インパクトA 20kg×1個 : 21cm×27cm×22cm

ディスポ試験管

**特徴** 自立式のディスポ試験管で、スクリューキャップ式で  
廃棄が容易で、ターラム管入りもご用意

**仕様** 滅菌: 電子線滅菌  
材質: ポリプロピレン(本体)  
ポリエチレン(キャップ)  
サイズ: 直径1.8cm(口径)×10.5cm



試験管立て付

品番	品名	入数	販売価格
1 012-18001	ディスポ試験管 滅菌済	150本(10本包装)	¥6,900- (@ ¥46-)
2 012-18002	ディスポ試験管 滅菌ターラム管入	150本(10本包装)	¥9,750- (@ ¥65-)
3 012-18003	ディスポ試験管 目盛付き	150本(10本包装)	¥9,300- (@ ¥62-)
012-18004	ディスポ試験管 無滅菌	200本(40本包装)	¥8,000- (@ ¥40-)

※1~2箱発送時 別途送料 3箱以上発送時 送料弊社負担  
箱の大きさ ディスポ試験管: 26cm×36cm×12.5cm

無菌卵黄液



**特徴** 生理食塩水で50%に調製した  
無菌卵黄液です  
調製、滅菌済のため培地に  
そのまま添加可能です

**仕様** 容量: 50ml/1本  
滅菌: ガンマ線滅菌  
容器材質: (本体)ガラス  
(キャップ)ポリプロピレン

**使用上の注意** 分注前に泡が出ないようにゆっくりと  
瓶を振り、よく混和して下さい

ご使用方法は、弊社ホームページの動画をご覧  
下さい

品番	品名	入数	販売価格
053-14001	無菌卵黄液	2本	¥1,694- (@¥847-)

※1~2箱発送時 別途送料 3箱以上発送時 送料弊社負担  
※使用期限: 製造日より6ヶ月(外箱に記載)、冷蔵保存(4℃~8℃)

フルステリの除菌スプレー



**特徴** 75%濃度エタノール製剤です  
食品添加物製剤のため、食品に  
直接噴霧できます

成分組成: エタノール 67.890%  
乳酸ナトリウム 0.025%  
精製水 32.085%

品番	品名	入数	販売価格
057-58012	フルステリの除菌スプレー	500ml×12本	¥15,630-
057-48002	フルステリの除菌スプレー 詰替用	4L×2本	¥12,450- (@¥6,225-)
057-48003	フルステリの除菌スプレー 詰替用	18L×1個	¥17,060-
057-53041	フルステリの除菌スプレー セット	500ml×3本 4L×1本	¥7,790-

◆品番の末尾「D」の商品は日本薬局方準拠品です

New 詰合せ 生培地

詰合せ: 10枚単位でお客様のご要望に応じて  
各種生培地を詰め合わせての発送が可能です



**特徴** 培地性能試験を実施していますので  
いつでも一定した高品質な培地を使用  
することができます  
10枚単位で詰め合わせての発送が可  
能です

◆表以外の培地は受注生産にて承  
ります  
納期についてはお問い合わせ下さい


サイズ 直径9cm×1.5cm

品番	品名	入数	販売価格
053-13012D	SCD寒天培地	100枚	¥16,100- (@¥161-)
053-13008D	SCDLP寒天培地	100枚	¥21,400- (@¥214-)
053-13011D	サブロー寒天培地	100枚	¥20,400- (@¥204-)
053-13024D	CP加サブロー寒天培地	100枚	¥20,400- (@¥204-)
053-13056D	R2A寒天培地	100枚	¥23,500- (@¥235-)
053-13009D	GPLP寒天培地	100枚	¥21,400- (@¥214-)
053-13129D	マッコンキー寒天培地	50枚	¥25,200- (@¥504-)
053-13155D	マンニト寒天培地	50枚	¥15,550- (@¥311-)
053-13160D	セトリミド寒天培地	50枚	¥28,150- (@¥563-)
053-13159D	コロンビア寒天培地	50枚	¥25,700- (@¥514-)
053-13162D	バイオレット・レッド・胆汁酸ブドウ糖寒天培地	50枚	¥25,700- (@¥514-)

動画

試験管培地

ターラム管入りですので、すぐにご使用いただけます

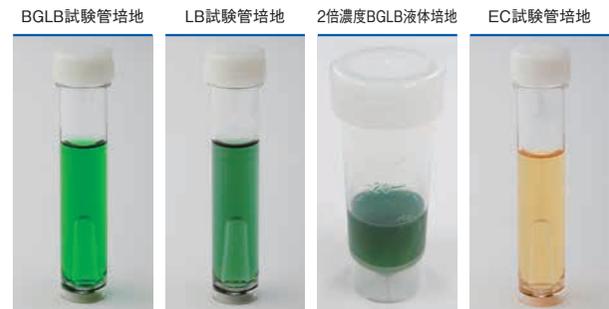


BGLB試験管培地 LB試験管培地 2倍濃度BGLB液体培地 EC試験管培地

食品衛生法大腸菌群検査に準拠しています  
ご使用方法は、弊社ホームページの動画をご覧下さい

食品衛生法糞便系  
大腸菌群の検査に  
準拠しています

大腸菌群および大腸菌(E.coli)の同時検出が可能な  
特定酵素基質培地による迅速同定培地です

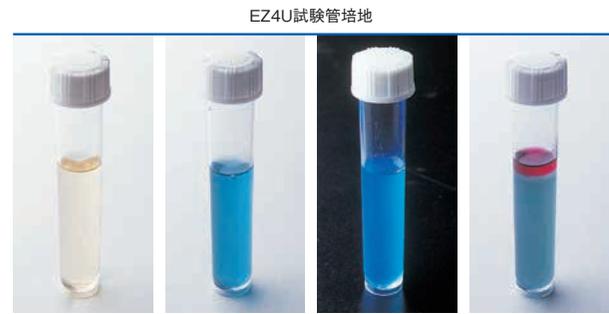

未接種 大腸菌群陽性 E.coli 陽性 インドール 試薬添加  
による確認試験(陽性)

品番	品名	入数	販売価格
053-13101	一般生菌用・標準寒天培地	50枚 (10枚× 5袋)	¥ 4,800- (@¥ 96-)
053-13102	大腸菌群用・デソキシコレート寒天培地		¥ 5,200- (@¥104-)
053-13103	カビ、酵母用・CP加ボテデキストロス寒天培地		¥ 5,450- (@¥109-)
053-13104	サルモネラ用・マデック寒天培地	100枚 (10枚× 10袋)	¥ 5,950- (@¥119-)
053-13105	腸炎ビブリオ用・TCBS寒天培地		¥ 6,050- (@¥121-)
053-13106	黄色ブドウ球菌用・卵黄加マンニト食塩寒天培地		¥ 7,150- (@¥143-)
053-13107	大腸菌群+大腸菌同時検出用・EZ2C寒天培地	100枚 (10枚× 10袋)	¥ 6,050- (@¥121-)
053-13110	セレウス菌用・卵黄加NGKG寒天培地		¥12,000- (@¥240-)
053-13127	カンピロバクター用・変法スキロー寒天培地		¥ 8,800- (@¥ 88-)
053-13001	一般生菌用・標準寒天培地	100枚 (10枚× 10袋)	¥ 9,500- (@¥ 95-)
053-13002	大腸菌群用・デソキシコレート寒天培地		¥10,100- (@¥101-)
053-13003	カビ、酵母用・CP加ボテデキストロス寒天培地		¥10,900- (@¥109-)
053-13004	サルモネラ用・マデック寒天培地	30枚	¥11,300- (@¥113-)
053-13005	腸炎ビブリオ用・TCBS寒天培地		¥12,100- (@¥121-)
053-13006	黄色ブドウ球菌用・卵黄加マンニト食塩寒天培地		¥13,400- (@¥134-)
053-13081	生培地ヘアードパーカー寒天培地	100枚 (10枚× 10袋)	¥11,300- (@¥113-)
053-13007	大腸菌群+大腸菌同時検出用・EZ2C寒天培地		¥ 9,700- (@¥ 97-)
053-13010	セレウス菌用・卵黄加NGKG寒天培地		¥12,100- (@¥121-)
053-13013	乳酸菌用・BCP加プレートカウントアガール	100枚 (10枚× 10袋)	¥12,100- (@¥121-)
053-13020	真菌用CP加GPLP寒天培地		¥21,800- (@¥218-)
053-13022	真菌用M40Y寒天培地		¥39,600- (@¥1,320-)
053-13535	真菌用DG-18寒天培地	100枚 (10枚×10袋)	お問い合わせください

※使用期限: 製造日より3ヶ月(外箱に記載)、冷蔵保存(4℃~8℃)  
NGKG、SCD、サブローは製造日より6ヶ月(外箱に記載)、冷蔵保存(4℃~8℃)  
箱の大きさ 生培地100枚: 47.5cm×23cm×19cm  
生培地 50枚: 26cm×20cm×18cm

ご注文は  
右記にて承ります

FAX ☎ 0120-82-4929  
TEL ☎ 0120-812-880

MAIL biosales@atect.co.jp  
アテクト 衛生検査 検索

ご注文は  
右記にて承ります

FAX ☎ 0120-82-4929  
TEL ☎ 0120-812-880

MAIL biosales@atect.co.jp  
アテクト 衛生検査 検索



◆品番の末尾「D」の商品と大容量SCD液体培地は日本薬局方準拠品です

培地充填試験用 大容量SCD液体培地



**特徴** 日本薬局方の培地充填試験に使用できる過減菌済ですぐに使用できます  
フィルターの目詰りの心配はありません

**仕様** 滅菌：濾過滅菌  
容器：PET  
容量：3L  
◆Y線滅菌も承ります

品番	品名	入数	販売価格
053-18001	大容量SCD液体培地	3L×3本	¥23,958- (@¥ 7,986-)
053-18002	大容量SCD液体培地(植物由来)2倍濃度	3L×3本	お問い合わせ下さい

※使用期限：製造日より6ヶ月(外箱に記載)  
箱の大きさ 大容量SCD液体培地：16cm×37cm×31cm

液体培地



**特徴** 調製なしで、すぐにご使用いただけます

品番	品名	入数	販売価格
053-18144D	SCD液体培地	90ml×100本	¥36,900- (@¥369-)
053-12044D	SCD液体培地	10ml×240本	¥39,600- (@¥165-)
053-19145D	サブロー液体培地	100ml× 50本	¥41,650- (@¥833-)
053-19146D	マッコンキー液体培地	100ml× 50本	¥45,550- (@¥911-)
053-12244D	ラバポート液体培地	10ml× 80本	¥16,320- (@¥204-)

※使用期限：製造日より6ヶ月、ラバポート液体培地のみ製造日より5ヶ月(外箱に記載)

湯せん培地



**特徴** 湯せんしてシャーレに注ぐだけですぐに混釈培養が行えます

**仕様** 容器：500ml(写真右)スクリュウキャップ付自立型袋  
容器：100ml(写真左)スクリュウキャップ付ボトル

品番	品名	入数	販売価格
055-12011	一般生菌用・標準寒天培地	500ml	¥14,520- (@¥ 726-)
055-12012	大腸菌群用・デソキシコレート寒天培地	× 20本	¥18,160- (@¥ 908-)
055-12013	カビ・酵母用・CP加ポテトデキストロス寒天培地	× 20本	¥20,580- (@¥1,029-)
055-11010	一般生菌用・標準寒天培地	100ml	¥24,200- (@¥ 242-)
055-11012	大腸菌群用・デソキシコレート寒天培地	× 100本	¥26,700- (@¥ 267-)
055-11013	カビ・酵母用・CP加ポテトデキストロス寒天培地	× 100本	¥29,100- (@¥ 291-)

品番	品名	入数	販売価格
055-12016D	SCD寒天培地		¥39,800- (@¥1,990-)
055-12015D	サブロー寒天培地	500ml	¥65,840- (@¥3,292-)
055-12024D	CP加サブロー寒天培地	×	¥65,840- (@¥3,292-)
055-12013D	CP加ポテトデキストロス寒天培地	20本	¥32,920- (@¥1,646-)
055-12017D	R2A寒天培地		¥46,480- (@¥2,324-)
055-11016D	SCD寒天培地		¥42,700- (@¥ 427-)
055-11015D	サブロー寒天培地	100ml	¥83,300- (@¥ 833-)
055-11024D	CP加サブロー寒天培地	×	¥83,300- (@¥ 833-)
055-11013D	CP加ポテトデキストロス寒天培地	100本	¥46,600- (@¥ 466-)
055-11017D	R2A寒天培地		¥52,400- (@¥ 524-)

※湯せん培地20mlもごさいますので、お問い合わせ下さい  
※使用期限：製造日より3ヶ月(外箱に記載)、冷蔵保存(4℃~8℃)  
SCD寒天培地、サブロー寒天培地は製造日より6ヶ月  
箱の大きさ 湯せん培地100ml：50cm×26cm×21cm  
湯せん培地500ml：36cm×35cm×27cm

◆品番の末尾「D」の商品は日本薬局方準拠品です



スライドロック式 スタンプ培地



**特徴** スライドロック機構で容易に蓋が外れません  
ハンドリング時の微生物汚染のリスクを抑えます  
検査箇所へ軽く押し付けるだけで簡単に検査が可能です  
品番にDのある製品は、培地面積25cm<sup>2</sup>で日本薬局方(コンタクトプレート法)に準拠しています

**仕様** 滅菌：オートクレーブ  
培地面積：25cm<sup>2</sup>  
サイズ：直径 7cm×1.5cm

**使用方法** ①スタンプ式シャーレの蓋を取り、培地表面を検査対象表面に押し付けます  
②検査対象の培地付着面をアルコールでふき取ります(放置すると菌が繁殖します)  
③それぞれの培養条件で培養します  
④発育したコロニー数をカウントし、25cm<sup>2</sup>あたりのコロニー数を求めます  
◆Y線滅菌、2重・3重包装も承ります

品番	品名	入数	販売価格
053-11001R	一般生菌用・標準寒天	30枚	¥ 6,600- (@¥220-)
053-11002R	大腸菌群用・デソキシコレート寒天培地	30枚	¥ 6,600- (@¥220-)
053-11007R	大腸菌群・大腸菌同時検出用・E22C寒天培地	30枚	¥ 6,600- (@¥220-)
053-11013RD	SCD寒天培地	100枚	¥20,400- (@¥204-)
053-11008RD	SCDLP寒天培地	100枚	¥20,400- (@¥204-)
053-11011RD	サブロー寒天培地	100枚	¥20,400- (@¥204-)
053-11024RD	CP加サブロー寒天培地	100枚	¥20,400- (@¥204-)

※使用期限：製造日より3ヶ月(外箱に記載)、冷蔵保存(4℃~8℃)  
箱の大きさ スタンプ培地100枚：35cm×15cm×15cm



スタンプ培地

詰合せ：10枚単位でお客様のご要望に応じて各種スタンプ培地を詰め合わせての発送が可能です



**特徴** 培地面積25cm<sup>2</sup>です  
培地調製が不要で押し付けるだけで検査が容易です  
◆下記商品以外の培地は受注生産にて承ります  
Y線照射も対応致します  
サイズ 直径6.5cm×1.2cm

ご使用方法は、弊社ホームページの動画をご覧ください

●入数 100枚(10枚×10袋) ◆30枚単位でも取り扱っております

品番	品名	販売価格
053-11001	一般生菌用・標準寒天培地	¥12,800- (@¥128-)
053-11002	大腸菌群用・デソキシコレート寒天培地	
053-11003	カビ・酵母用・CP加ポテトデキストロス寒天培地	
053-11004	サルモネラ用・マデック寒天培地	
053-11005	腸炎ビブリオ用・TCBS寒天培地	
053-11006	黄色ブドウ球菌用・卵黄加マンニト食塩寒天培地	
053-11007	大腸菌群+大腸菌同時検出用・E22C寒天培地	
053-11008	殺菌剤効果確認用・SCDLP寒天培地	
053-11010	セレウス菌用・卵黄加NGKG寒天培地	

※使用期限：製造日より3ヶ月(外箱に記載)、冷蔵保存(4℃~8℃)  
箱の大きさ スタンプ培地100枚：35cm×15cm×15cm



プチ生培地

詰合せ：10枚単位でお客様のご要望に応じて各種生培地を詰め合わせての発送が可能です



**特徴** 直径6cmの小口径の生培地です  
陰性及び陽性を確認する検査においてプチ生培地のご使用により、コスト削減を実現します  
直径9cmの生培地よりも多くのシャーレがインキュベーターに入るため、1度により多くの検査を実施できます  
サイズ 直径6cm×1.5cm

品番	品名	入数	販売価格
053-16001	一般生菌用・標準寒天培地	100枚(5枚×20袋)	¥ 8,300- (@¥ 83-)
053-16004	サルモネラ用・マデック寒天培地	100枚(5枚×20袋)	¥10,700- (@¥107-)
053-16005	腸炎ビブリオ用・TCBS寒天培地	100枚(5枚×20袋)	¥ 9,700- (@¥ 97-)
053-16006	黄色ブドウ球菌用・卵黄加マンニト寒天培地	100枚(5枚×20袋)	¥10,400- (@¥104-)
053-16007	大腸菌群+大腸菌同時検出用・E22C寒天培地	100枚(5枚×20袋)	¥11,900- (@¥119-)
053-16010	セレウス菌用・卵黄加NGKG寒天培地	100枚(5枚×20袋)	¥10,700- (@¥107-)

※使用期限：製造日より3ヶ月(外箱に記載)、冷蔵保存(4℃~8℃)  
箱の大きさ プチ生培地100枚：33cm×15cm×17cm

ご注文は  
右記にて承ります

FAX ☎ 0120-82-4929  
TEL ☎ 0120-812-880

MAIL biosales@atect.co.jp

アテクト 衛生検査 検索

ご注文は  
右記にて承ります


FAX ☎ 0120-82-4929  
TEL ☎ 0120-812-880

MAIL biosales@atect.co.jp

アテクト 衛生検査 検索

コリターグ®

動画

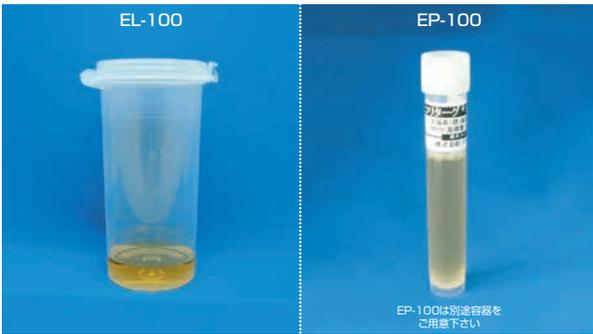

**特徴** 上水試験方法2011年に記載されているIPTG添加ONPG-MUG培地です  
IPTG添加ONPG-MUG培地で唯一の液体培地です

**使用方法** 検水を100ml入れて、36°C±1°C、24時間培養する  
液体が黄色く変化すれば大腸菌群陽性と判断します  
紫外線ランプを照射し、培地が青色の蛍光を発すれば大腸菌陽性と判断します  
(比色判定用のコンパレータも別途販売しております)

ご使用方法は、弊社ホームページの動画をご覧ください

品番	品名	入数	販売価格
057-10601	コリターグEP-100	100本	¥25,500- (@¥255-)
057-10602	(検水100ml用)	10本	¥ 3,210- (@¥321-)
057-10101	コリターグEL-10	200本	¥27,000- (@¥135-)
057-10102	(検水 10ml用)	100本	¥14,600- (@¥146-)
057-10201	コリターグEL-100	100本	¥35,900- (@¥359-)
057-10202	(検水100ml用)	25本	¥10,300- (@¥412-)
057-10301	コリターグEL-1000	2本	¥54,450- (@¥27,225-)
057-10302	(培地1Lガラス容器入り)	1本	¥27,770-

※使用期限：製造日より12ヶ月(外箱に記載)、冷蔵保存(4°C~8°C)  
箱の大きさ EP-100 100本 59cm×34cm×23cm  
EP-100 10本 6.5cm×15cm×10.5cm  
EL-10 200本 35cm×31.5cm×24cm  
EL-10 100本 35cm×30.5cm×12cm  
EL-100 100本 59cm×34cm×23cm  
EL-100 25本 35cm×30.5cm×12cm  
EL-1000 2本 12.5cm×25cm×27cm  
EL-1000 1本 11.5cm×11.5cm×25cm

ふき取り検査用器具

動画

CRスタンプ



**特徴** 鼻前庭や手指、製造ラインなどのふき取り  
検査にお使いいただけます  
製品同士が積み重ねられるため、コンパクト  
にまとまり製造現場へ持ち運びやすいです

**使用方法** ①スポンジ部分で検査箇所をふき取る  
②培地の表面全体に、直接スタンプして、  
均一に塗布する  
③培養後、菌数を測定する

**仕様** 入数：1,000個(10個×100袋)  
滅菌：E.O.G滅菌  
材質：本体・フタ：ポリプロピレン  
スポンジ：ポリエチレン

ご使用方法は、弊社ホームページの動画をご覧ください

品番	品名	入数	販売価格
012-30001	CRスタンプ	1,000個(10個包装×100袋)	¥33,000- (@¥33-)
012-30002		300個(10個包装×30袋)	¥12,000- (@¥40-)

箱の大きさ CRスタンプ1000個入：40cm×39cm×29cm

ハンドスタンプシャーレ  
培地入りハンドスタンプシャーレ



**特徴** 手のひら全体が入る大きさのシャーレです

**仕様** 滅菌：電子線滅菌  
(培地無しハンドスタンプシャーレのみ)  
材質：ポリスチレン  
サイズ：21.5cm×14.5cm×1.2(H)cm

品番	品名	入数	販売価格
011-90101	ハンドスタンプシャーレ	120枚(10枚包装)	¥15,720- (@¥131-)
011-90102		60枚(10枚包装)	¥ 8,760- (@¥146-)
011-90201	一般生菌用・標準寒天培地	60枚(1枚包装)	¥16,020- (@¥267-)
011-90202	大腸菌群用・デソキシコレート寒天培地		¥18,180- (@¥303-)
011-90203	黄色ブドウ球菌用・ 卵黄加マンニト食塩寒天培地	60枚(1枚包装)	¥21,780- (@¥363-)
011-90205	カビ・酵母用・ CP加ポトデキストロス寒天培地		¥19,620- (@¥327-)

※使用期限：培地入りハンドスタンプシャーレは製造日より3ヶ月(外箱に記載)、冷蔵保存(4°C~8°C)  
●2は、培地入りハンドスタンプシャーレです  
箱の大きさ ハンドスタンプシャーレ：38cm×29cm×23cm

y-pit(ふき取り検査用器具)/y-pit Y線



**特徴** 様々な環境検査で、細菌を簡単に採  
取できます  
綿棒と一体型のキャップを採用してい  
るため、作業性に優れています  
希釈液が10ml分注されています

**使用方法** ①キャップを本体からはずして綿棒で  
測定箇所の表面を100cm<sup>2</sup>を目安  
にふき取る  
②キャップを戻してよく振り、綿棒に付  
着した微生物を分散させる  
③溶液をスポイトなどで採取後、培地  
に滴下し培養する

ご使用方法は、弊社ホームページの動画をご覧ください

品番	品名	入数	販売価格
051-51001	y-pit(ワイピット)	240本(40本×6箱)	¥19,920- (@¥ 83-)
051-51101		120本(10本×12箱)	¥11,640- (@¥ 97-)
051-51201		60本(10本×6箱)	¥ 7,680- (@¥128-)
051-51404	ワイピットY線	40本(8本×5セット)	¥10,560- (@¥264-)
3205	ワイピット精製水	40本(1箱)	¥12,760- (@¥319-)
	ワイピット精製水 Y線	40本(1箱)	¥24,200- (@¥605-)

※使用期限：製造日より3ヶ月(外箱に記載)  
箱の大きさ y-pit 240本：37cm×29cm×23cm  
y-pit 120本：40cm×30cm×12cm  
y-pit 60本：28cm×35cm×28cm

滅菌綿棒



**特徴** 優れた吸水性で  
綿棒先端部分が膨張しません  
残留溶解物質が少ない仕様でふき  
取り検査に最適です  
また、可燃ごみとして焼却でき廃棄も  
簡単です

品番	品名	入数	販売価格
017-20001	滅菌綿棒10本包装タイプ	1000本(10本包装×100袋)	¥8,000- (@¥8-)
017-20002	滅菌綿棒20本包装タイプ	1000本(20本包装×50袋)	¥7,000- (@¥7-)

箱の大きさ 滅菌綿棒：20cm×29cm×21cm

動画

滅菌希釈水・緩衝液



ふたが白：滅菌希釈水  
ふたが黄：滅菌ペプトン食塩緩衝液  
ふたが緑：滅菌リン酸緩衝液

**特徴** (9mlタイプ) 段階希釈水としてご使用いただけます  
スクリー式キャップを採用しています  
自立タイプの容器なので、作業性が向上します  
(45ml・90mlタイプ) 検体を入れたストマッカー袋に滅菌希釈水全量を注ぐだけで、  
固形試料の前処理ができます

**仕様** 9ml (本体)ポリスチレン (キャップ)ポリエチレン  
90ml・45ml (本体)ポリプロピレン (キャップ)ポリエチレン  
希釈水(pH7.2)  
滅菌ペプトン食塩緩衝液(pH7.0)  
滅菌リン酸緩衝液(pH7.2)  
◆ご希望のpH値について、ご相談下さい

①滅菌希釈水

品番	品名	入数	販売価格
051-21001	滅菌希釈水(9ml)	360本	¥28,800- (@¥80-)
051-31101	滅菌希釈水(45ml)	100本	¥10,200- (@¥102-)
051-31001	滅菌希釈水(90ml)	100本	¥15,000- (@¥150-)
051-31201	滅菌希釈水(225ml)	40本入り	¥10,000- (@¥250-)
051-32001	滅菌希釈水(3L)	3L×3本入り	¥ 6,600- (@¥2,200-)

※使用期限：製造日より6ヶ月(外箱に記載)  
箱の大きさ 滅菌希釈水 9ml：44cm×29cm×34cm

②緩衝液

品番	品名	入数	販売価格
051-71001	滅菌ペプトン食塩緩衝液(90ml)	100本	¥17,000- (@¥170-)
051-42001	滅菌ペプトン食塩緩衝液(9ml)	360本(40本×9箱)	¥28,800- (@¥80-)
051-61001	滅菌リン酸緩衝液(90ml)	100本	¥15,000- (@¥150-)
051-41001	滅菌リン酸緩衝液(9ml)	360本(40本×9箱)	¥28,800- (@¥80-)
051-61601	滅菌リン酸緩衝液(990ml)	10本	¥10,120- (@¥1,012-)

※使用期限：製造日より6ヶ月(外箱に記載) ◆225mlタイプも販売しております  
箱の大きさ 緩衝液 9ml：44cm×29cm×34cm  
緩衝液 90ml：35cm×27cm×26cm

動画

ソルティバッグ



**特徴** 希釈水が分注された、ストマッカー用袋です  
225ml、90mlの2タイプを取り揃えましたので用途に応じてお使いいただけます  
検体を入れるだけで、そのまま、ストマッカー処理が行えます  
自立型の袋なので、スタンドが不要です  
袋上部にノッチを入れていますので、容易に開封できます  
◆フィルター付きも販売しております

品番	品名	入数	販売価格
051-81101	ソルティバッグ225ml	30袋	¥8,100- (@¥270-)
051-81001	ソルティバッグ 90ml	30袋	¥7,500- (@¥250-)

※使用期限：製造日より6ヶ月(外箱に記載)  
箱の大きさ ソルティバッグ：39cm×50cm×28cm

検体の採取・保存、検査後の廃棄用必需品

ディスボピペティ



**特徴** 正確に液体の計量や分注が行えます  
使い捨てのため洗浄・滅菌などの手間が省けランニングコストの低減にも貢献します

**仕様** 滅菌：ガンマ線滅菌 材質：ポリスチレン  
製品の仕様は随時変更になる場合がございます  
ご了承下さい

品番	品名	入数	販売価格
021-50001	ディスボピペティ1ml個包装	300本入	¥ 8,700- (@¥ 29-)
021-50002	ディスボピペティ2ml個包装	300本入	¥ 9,300- (@¥ 31-)
021-50003	ディスボピペティ5ml個包装	200本入	¥10,200- (@¥ 51-)
021-50004	ディスボピペティ10ml個包装	200本入	¥11,400- (@¥ 57-)
021-50006	ディスボピペティ50ml個包装	100本入	¥17,100- (@¥171-)

箱の大きさ ディスボピペティ1ml個包装・2ml個包装：19cm×34cm×18cm  
ディスボピペティ5ml個包装・10ml個包装：19cm×40cm×18cm  
ディスボピペティ50ml個包装：19cm×40cm×24cm

ご注文は  
右記にて承ります

FAX ☎ 0120-82-4929  
TEL ☎ 0120-812-880

MAIL biosales@atect.co.jp

アテクト 衛生検査 検索

ご注文は  
右記にて承ります

FAX ☎ 0120-82-4929  
TEL ☎ 0120-812-880

MAIL biosales@atect.co.jp

アテクト 衛生検査 検索

PTO ディスポスポイト

**特徴**  
目安の目盛り付き  
無滅菌製品もあります  
※滅菌1本包装品もあります

**仕様**  
入数：1,000本(10本×100袋)  
500本(1本×500袋)  
滅菌：EOG滅菌  
材質：ポリエチレン




品番	品名	サイズ	販売価格
1 021-20102	ディスポスポイト 1ml	長さ:15.4cm	¥16,000- (@¥16-)
2 021-20202	ディスポスポイト 2ml	長さ:13.5cm	¥16,000- (@¥16-)
3 021-20302	ディスポスポイト 3ml	長さ:17.5cm	¥18,000- (@¥18-)
1 021-20101	ディスポスポイト1ml無滅菌	長さ:15.4cm	¥11,000- (@¥11-)
2 021-20201	ディスポスポイト2ml無滅菌	長さ:13.5cm	¥13,000- (@¥13-)
3 021-20301	ディスポスポイト3ml無滅菌	長さ:17.5cm	¥14,000- (@¥14-)

箱の大きさ ディスポスポイト 1ml：29cm×45cm×18cm  
ディスポスポイト 2ml：29cm×45cm×18cm  
ディスポスポイト 3ml：29cm×44cm×29cm

●個包装 500本入り

品番	品名	サイズ	販売価格
1 021-20112	ディスポスポイト1ml個包装	長さ：15.4cm	¥18,000- (@¥36-)
2 021-20212	ディスポスポイト2ml個包装	長さ：13.5cm	¥18,500- (@¥37-)
3 021-20312	ディスポスポイト3ml個包装	長さ：17.5cm	¥19,500- (@¥39-)

ストマッカー用袋

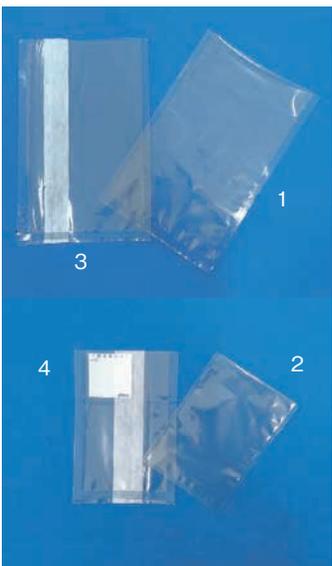

**特徴**  
フィルター付ストマッカー用袋はフィルターにより、ストマッカー処理後の残渣を取り除いた試料液を簡単に採取できます

**仕様**  
滅菌：ガンマ線滅菌  
材質：ナイロン+ポリエチレン  
サイズ：1. 30(深さ)cm×19(幅)cm  
2. 15(深さ)cm×11(幅)cm  
3. 30(深さ)cm×19(幅)cm  
4. 18(深さ)cm×12(幅)cm

◆20枚からの少数販売も行なっています

※ご希望枚数をご相談ください


品番	品名	入数	販売価格
1 061-11200	ストマッカー用袋(大)	1,000枚	¥16,000- (@¥16-)
2 061-11300	ストマッカー用袋(小)	(20枚包装)	
3 061-21001	フィルター付ストマッカー用袋	500枚(20枚包装)	¥15,000- (@¥30-)
4 061-21013	フィルター付ストマッカー用袋(小)	500枚(5枚包装)	¥11,000- (@¥22-)

箱の大きさ ストマッカー用袋(大)：22cm×36cm×22cm  
ストマッカー用袋(小)：17cm×22.5cm×19cm  
フィルター付ストマッカー用袋(大)：22cm×36cm×22cm  
フィルター付ストマッカー用袋(小)：17cm×22.5cm×19cm

PTO ディスポコンラージ棒/マイクロロープ

**特徴**  
滅菌ディスポ製品のため、使用前の煩雑な洗浄滅菌作業から解放されます  
コンタミネーションの心配がなく、安心してご使用いただけます


**仕様**  
ディスポコンラージ棒 直径0.4cm×15cm  
ディスポマイクロロープ 長さ23cm  
滅菌：EOG滅菌 材質：ポリスチレン

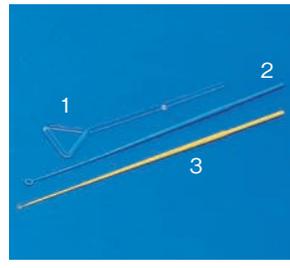

品番	品名	入数	販売価格
1 017-01101	ディスポコンラージ棒	1,000本(10本包装)	¥8,000- (@¥8-)
017-01201		500本(1本包装)	¥15,000- (@¥30-)
2 017-02101	ディスポマイクロロープ(10μ)	2,000本(20本包装)	¥16,000- (@¥8-)
017-02201		1,000本(5本包装)	¥16,000- (@¥16-)
3 017-03101	ディスポマイクロロープ(1μ)	2,000本(20本包装)	¥16,000- (@¥8-)
017-03201		1,000本(5本包装)	¥16,000- (@¥16-)

箱の大きさ ディスポコンラージ棒：20cm×38cm×28cm  
ディスポマイクロロープ10μ：26cm×34cm×14cm  
ディスポマイクロロープ1μ：26cm×34cm×14cm

フィルター付ストマタッチ袋

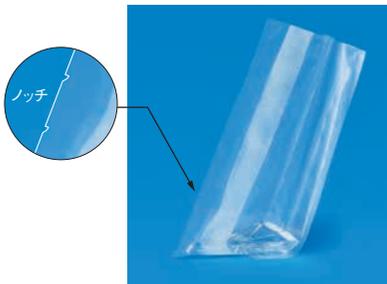

**特徴** 自立するので袋を片手で扱えます  
ノッチがあるので、ビレットの扱いがしやすくなり、ビレット本体を汚すこともなくなります

**仕様** 滅菌：ガンマ線滅菌  
材質：ナイロン+ポリエチレン  
サイズ：30(深さ)cm×14(幅)cm(マチ幅 5cm)

品番	品名	入数	販売価格
061-22001	フィルター付ストマタッチ袋	400枚(20枚包装)	¥26,000- (@¥65-)

箱の大きさ フィルター付ストマタッチ袋：50cm×39cm×28cm

ディスポピンセット



**特徴** 1本ずつの包装で安心です  
先端部分に滑り止め加工があります

**仕様** 滅菌：EOG滅菌  
材質：ポリプロピレン

品番	品名	サイズ	入数	販売価格
061-33001	ディスポピンセット	7cm	100本	¥6,800- (@¥68-)

箱の大きさ ディスポピンセット：19cm×26cm×16.5cm

オートクレープ用廃棄バッグ



**特徴** 口締め用バンド付き

**仕様** 入数：200枚  
材質：特殊耐熱ポリプロピレン  
サイズ：大 70(深さ)cm×50(幅)cm  
中 66(深さ)cm×30.5(幅)cm  
小 40(深さ)cm×30(幅)cm

◆少数販売も行なっています

品番	品名	入数	販売価格
062-11100	オートクレープ用廃棄バッグ大(700×500)青	200枚	¥12,200- (@¥61-)
062-11101	オートクレープ用廃棄バッグ大(700×500)クリア		¥12,200- (@¥61-)
062-11102	オートクレープ用廃棄バッグ中(660×305)青		¥12,200- (@¥61-)
062-11103	オートクレープ用廃棄バッグ中(660×305)クリア		¥12,200- (@¥61-)
062-11104	オートクレープ用廃棄バッグ小(400×300)青		¥7,800- (@¥39-)
062-11105	オートクレープ用廃棄バッグ小(400×300)クリア		¥7,800- (@¥39-)

箱の大きさ オートクレープ用廃棄バッグ：39cm×53cm×10cm  
オートクレープ用廃棄バッグ中305×660サイズ：34cm×38cm×12cm

ディスポロックボトル



**特徴** 口径が広くサンプル採取や、分注作業がし易いです  
密封できます ロックできます  
透明なので中身が確認できます

**仕様** 滅菌：電子線滅菌  
材質：ポリプロピレン  
容量：120ml(最大)

ご使用方法は、弊社ホームページの動画をご覧ください

※ご希望枚数をご相談ください

品番	品名	入数	販売価格
015-00001	ディスポロックボトル	150本入(5本包装×30袋)	¥23,250- (@¥155-)

箱の大きさ ディスポロックボトル：26cm×53cm×40.5cm

滅菌検食袋(保存食用袋)



**特徴** 検体保存や保存食用にご使用いただけます  
チャック式のため、ワンタッチで開閉できます

**仕様** 滅菌：ガンマ線滅菌  
材質：ポリエチレン  
サイズ：D 12(深さ)cm×8.5(幅)cm F 17(深さ)cm×12(幅)cm  
H 24(深さ)cm×17(幅)cm J 34(深さ)cm×24(幅)cm  
※サンプリングバッグとしてもご使用いただけます

ご使用方法は、弊社ホームページの動画をご覧ください

※ご希望枚数をご相談ください

品番	品名	入数	販売価格
1 061-21201	滅菌検食袋D	2,000枚(100枚包装)	¥16,000- (@¥8-)
061-21204	滅菌検食袋F	1,000枚(100枚包装)	¥16,000- (@¥16-)
2 061-21202	滅菌検食袋H	1,000枚(100枚包装)	¥16,000- (@¥16-)
3 061-21203	滅菌検食袋J	700枚(100枚包装)	¥21,000- (@¥30-)
061-21205	滅菌検食袋MARK-H	1,000枚(100枚包装)	¥17,000- (@¥17-)

箱の大きさ 滅菌検食袋D：20cm×30cm×13cm  
滅菌検食袋F：19cm×23cm×17cm  
滅菌検食袋H：23cm×38cm×15cm  
滅菌検食袋J：29.5cm×45cm×18cm

自立式滅菌容器



**特徴**  
ダラム管有・無をラインナップ  
2倍濃度BGLB、LB液体培地を使用する  
検査(大腸菌群)にご使用いただけます  
検体のサンプリング、保存用容器としても  
ご使用いただけます

**仕様**  
容量：10ml  
滅菌：ガンマ線滅菌  
材質：(容器)ポリプロピレン  
(キャップ)ポリエチレン

品番	品名	入数	販売価格
015-10001	自立式滅菌容器 ダラム管有	100本(5本包装×20袋)	¥12,100- (@¥121-)
015-10002	自立式滅菌容器 ダラム管無	100本(5本包装×20袋)	¥12,100- (@¥121-)

ご注文は  
右記にて承ります

FAX ☎ 0120-82-4929  
TEL ☎ 0120-812-880

MAIL biosales@atect.co.jp

アテクト 衛生検査 検索

ご注文は  
右記にて承ります

FAX ☎ 0120-82-4929  
TEL ☎ 0120-812-880

MAIL biosales@atect.co.jp

アテクト 衛生検査 検索

# 検体の採取・保存、検査後の廃棄用必需品

## 滅菌検液袋



**特徴** チャック式のため、液漏れを防止できます  
スタンディング(自立式)タイプです

**仕様** 滅菌：ガンマ線滅菌  
材質：ナイロン+ポリエチレン  
サイズ：10(幅)cm×16(深さ)cm

品番	品名	入数	販売価格
061-21301	滅菌検液袋	300枚(50枚包装)	¥18,300-(@¥61-)

箱の大きさ 滅菌検液袋：27.5cm×35cm×9cm

New

## 滅菌検液袋 遮光タイプ1200ml




**特徴** ■5層フィルムでバリアー性あり湿度対策可能  
■アルミ素材で遮光性機能あり  
■ヒートシール対応袋で密封が可能  
■自立式袋で操作性に優れている  
■丸めて廃棄でき、ゴミを削減  
■10枚/袋など必要な枚数で梱包可能

**仕様** 滅菌：ガンマ線滅菌  
材質：ポリエステル・ポリエチレン・アルミ  
サイズ：18(幅)cm×26(深)cm

品番	品名	入数	販売価格
061-21302	滅菌検液袋 遮光タイプ 1200ml	50枚/袋	¥8,800-(@¥176-)

# その他検査必需品

## 滅菌済ディスポまな板(ブルー・グリーン・オレンジ)

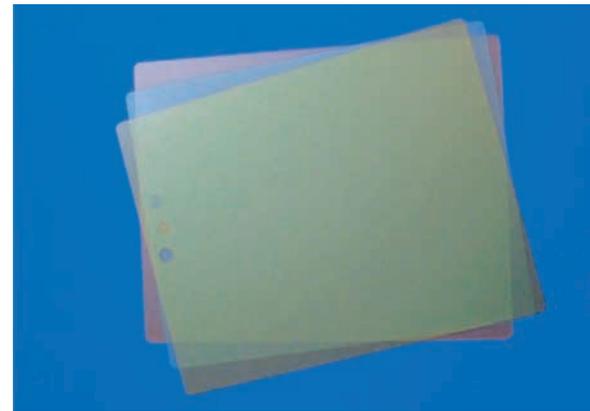

**特徴** 3色あるため、食材、場所等によって使い分けことができ衛生管理や整理整頓に便利です  
ガンマ線滅菌済みで、まな板からの雑菌汚染の心配が無く衛生的です

**仕様** 滅菌：ガンマ線滅菌  
材質：ポリプロピレン

品番	品名	入数	販売価格
061-40001	滅菌済ディスポまな板	30枚入り(10枚×3色)	¥8,910-(@¥297-)

PTO

## 滅菌採水ボトル



**特徴**

密閉容器なので、持ち運びにも安心です  
広口のスクリューキャップ式容器なので、容易に採取できます  
ハイボ入りは、水道水の細菌検査にご使用いただけます

**仕様**

- (100ml) サイズ 胴径 直径5cm×高さ9.4cm 口径 3.2cm  
材質：(本体)ポリエチレン (キャップ)ポリプロピレン
- (200ml) サイズ 胴径 直径5.9cm×高さ11.5cm 口径 3.2cm  
材質：(本体・キャップ)ポリエチレン
- (クリアボトル) サイズ 胴径 直径5cm×高さ9.4cm 口径 3.2cm  
材質：(本体・キャップ)ポリプロピレン

◆品番末尾「EB」：電子線滅菌  
それ以外：EOG滅菌

	品番	品名	入数	販売価格
1	014-20121EB	滅菌採水ボトル(電子線滅菌)	(100ml) 200個	¥22,800-(@¥114-)
	014-20121	滅菌採水ボトル(EOG滅菌)	(100ml) 200個	¥22,800-(@¥114-)
	014-20221	ハイボ入滅菌採水ボトル(EOG滅菌)	(100ml) 200個	¥27,200-(@¥136-)
2	014-21121EB	滅菌採水ボトル(電子線滅菌)	(200ml) 150個	¥21,900-(@¥146-)
	014-21121	滅菌採水ボトル(EOG滅菌)	(200ml) 150個	¥21,900-(@¥146-)
3	014-21221	ハイボ入滅菌採水ボトル(EOG滅菌)	(200ml) 150個	¥26,250-(@¥175-)
	014-20321	滅菌クリアボトル(EOG滅菌)	(100ml) 200個	¥29,200-(@¥146-)
4	014-20122	滅菌採水ボトル(ハイボ無し)(EOG滅菌)	(50ml) 500個	¥60,000-(@¥120-)

箱の大きさ (100ml)：47cm×47cm×34cm  
(200ml)：40cm×51cm×43cm

# その他検査必需品

## コロニー標本



**特徴** 本物の細菌と判別がつかないくらい、精度にこだわっています  
実際の細菌では無いので、感染の恐れがなく安全です  
判定基準としてご使用下さい

**仕様** 材質：プラスチック

※特注でご希望のコロニー標本を作成致します。  
詳しくはお問い合わせください。

品番	品名	販売価格
095-00001	コロニー標本 黄色ブドウ球菌用(卵黄加マンニト食塩)	¥9,900-
095-00002	コロニー標本 セレウス菌用(卵黄加NGKG)	¥9,900-
095-00003	コロニー標本 サルモネラ(マデック)	¥9,900-
095-00004	コロニー標本 腸炎ビブリオ(TCBS)	¥9,900-

セレウス菌

New

## 滅菌カップ



**特徴** 液体・粉体・固体等、検体のサンプリングや保存が可能な滅菌済のカップです  
検体・液体を調合する際の秤皿としてもご使用いただけます

**仕様** 滅菌：電子線滅菌  
材質：A-PET  
耐熱温度：60℃  
カップサイズ：直径10cm 高さ4.5cm

品番	品名	入数	販売価格
035-50001	滅菌カップ	200個(10個包装)	¥13,200-(@¥66-)

ご注文は  
右記にて承ります

FAX ☎ 0120-82-4929  
TEL ☎ 0120-812-880

MAIL biosales@atect.co.jp

アテクト 衛生検査 検索

ご注文は  
右記にて承ります

FAX ☎ 0120-82-4929  
TEL ☎ 0120-812-880

MAIL biosales@atect.co.jp


アテクト 衛生検査 検索

～食品衛生法準拠品～



- 用途:** サルモネラ属菌の前増菌培養  
黄色ブドウ球菌検査の検体の希釈や、段階希釈等
  - 対象:** 非加熱食肉製品、特定加熱食肉製品、加熱食肉製品(加熱殺菌後包装)
  - 特徴:** 225ml: 自立型の袋ですので、試料を入れてそのまま培養できます  
3L: 大容量でコスト重視のお客様にお勧めです。ペットボトル容器で破損の心配がございません。ボトル(ビュレット)ディスペンサーを装着してご使用いただけます。
- ◆9mlも製造可能です
- |    |                          |
|----|--------------------------|
| 品名 | 緩衝ペプトン水 225ml            |
| 品番 | 053-15002                |
| 入数 | 30袋                      |
| 価格 | ¥11,880-                 |
| 品名 | 緩衝ペプトン水 90ml             |
| 品番 | 051-16101                |
| 入数 | 100本                     |
| 価格 | ¥19,800-                 |
| 品名 | <b>NEW</b> 大容量緩衝ペプトン水 3L |
| 品番 | 053-15005                |
| 入数 | 3L×3本                    |
| 価格 | ¥11,880-                 |

無分割培地

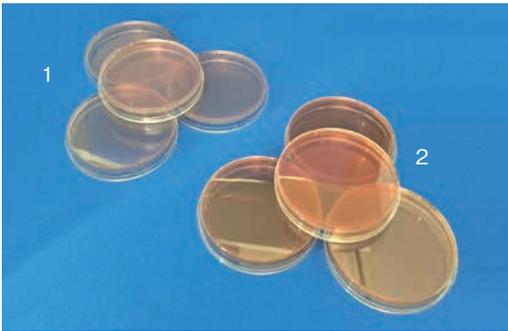


- 用途** 便などの臨床材料・食品など材料中の病原性大腸菌O157の分離培養
- 特徴** CTSMACは、O157と類似する緑膿菌の発育を抑えることにより鑑別を容易にしております
- | 品番 | 品名                               | 入数   | 販売価格       |
|----|----------------------------------|------|------------|
| 1  | 054-13041IKK アルティメディア CTSMAC寒天培地 | 100枚 | お問い合わせください |
| 2  | 054-13036IKK アルティメディア SSPRO寒天培地  | 100枚 | お問い合わせください |
- ※使用期限: 製造日より3ヶ月(外箱に記載)、冷蔵保存(4℃~9℃)
- ◆受注生産品となりますので、納期については、お問い合わせ下さい

2分割培地




- 用途** SS 便などの臨床材料・食品など材料中の分離目的培地 サルモネラ・シゲラの分離培養  
CTSMAC 便などの臨床材料・食品など材料中の病原性大腸菌O157・O26・O111の分離培養
- 特徴** SSは、サルモネラ菌の発育を大きく発育をさせることにより、他雑菌に埋もれていても発見することが可能です シトロバクターは硫化水素の産生を遅らせることにより鑑別を容易にしております  
CTSMACは、O157類似する緑膿菌の発育を抑えることにより鑑別を容易にしております
- | 品番 | 品名                                  | 入数   | 販売価格       |
|----|-------------------------------------|------|------------|
| 1  | 054-13003IKK アルティメディア SS/CTSMAC寒天培地 | 100枚 | お問い合わせください |
| 2  | 054-13025IKK アルティメディア SS/EHEC寒天培地   | 100枚 | お問い合わせください |
- ※使用期限: 製造日より3ヶ月(外箱に記載)、冷蔵保存(4℃~9℃)
- ◆受注生産品となりますので、納期については、お問い合わせ下さい


サルモネラ属菌試験法

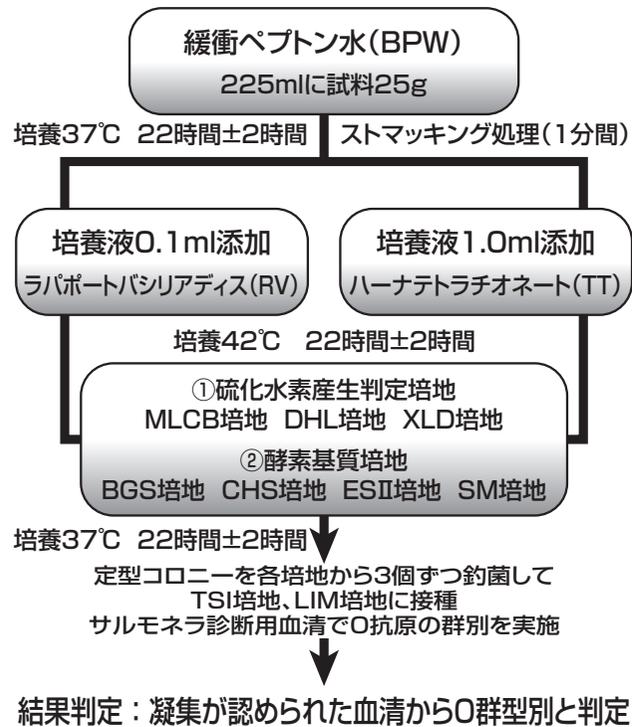

黄色ブドウ球菌試験法

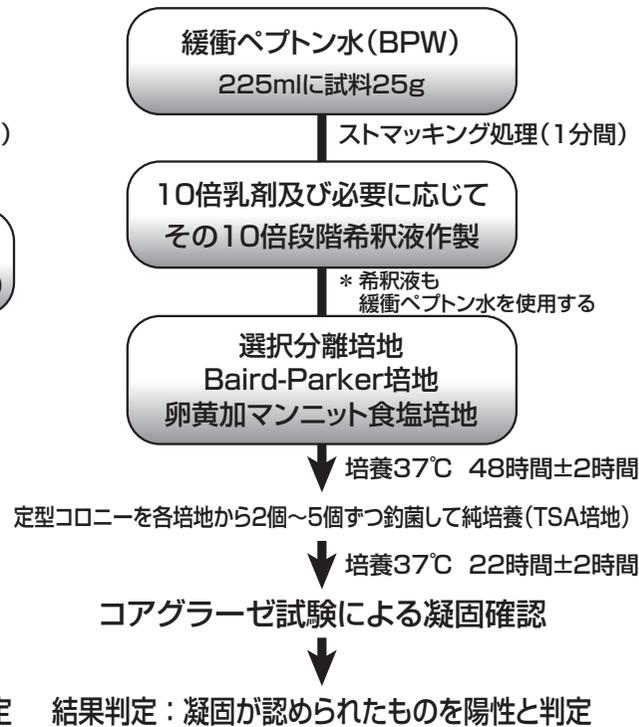

試験管培地

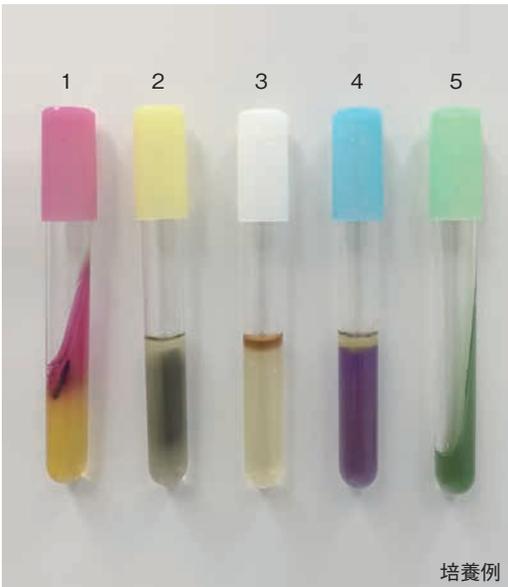

- 使用方法** 腸内細菌の鑑別(乳糖・白糖・ブドウ糖の分解、ガス産生性、硫化水素産生)  
糖分解性 乳糖、白糖両方あるいはいずれか一方の分解菌は高層・斜面共に黄色に変化する  
ブドウ糖のみ分解する菌は高層部が黄色になり、斜面部は赤色のままである  
非発酵菌は高層・斜面共に赤色のまま(無変化)である  
硫化水素産生性 硫化水素産生は高層部に黒色沈降物の生成が見られる  
ガス産生性 ガス産生は培地亀裂や気泡で判定される
- | 品番 | 品名                           | 入数  | 販売価格              |
|----|------------------------------|-----|-------------------|
| 1  | 054-12101IKK PS TSI寒天培地(高斜面) | 25本 | ¥ 2,750- (@¥110-) |
|    | 054-12001IKK                 | 50本 | ¥ 4,400- (@¥ 88-) |
| 2  | 054-12102IKK PS SIM寒天培地(半流動) | 25本 | ¥ 2,750- (@¥110-) |
|    | 054-12002IKK                 | 50本 | ¥ 4,400- (@¥ 88-) |
| 3  | 054-12116IKK PS VP寒天培地(半流動)  | 25本 | ¥ 2,750- (@¥110-) |
|    | 054-12016IKK                 | 50本 | ¥ 4,400- (@¥ 88-) |
| 5  | 054-12115IKK PS SC寒天培地(全斜面)  | 25本 | ¥2,500- (@¥100-)  |
|    | 054-12015IKK                 | 50本 | ¥4,000- (@¥ 80-)  |
| 4  | 054-12114IKK PS LIM寒天培地(半流動) | 25本 | ¥ 2,750- (@¥110-) |
|    | 054-12014IKK                 | 50本 | ¥ 4,400- (@¥ 88-) |
- ※使用期限: 製造日より3ヶ月(外箱に記載)、冷蔵保存(4℃~9℃)
- ◆受注生産品となりますので、納期については、お問い合わせ下さい

- 使用方法** 腸内細菌の鑑別(クエン酸塩)  
クエン酸塩分解 陽性菌はコロニー形成と培地が青色になる  
陰性菌はコロニー形成なく無変化
- 使用方法** 腸内細菌の鑑別(アセトイン産生→VP反応)  
VP反応 VP試薬滴下後、最終判定は1時間後に行います  
陽性菌は赤色、深紅色になります 陰性菌は無変化
- 使用方法** 腸内細菌の鑑別(リジン脱炭酸性、インドール産生性、運動性)  
リジン脱炭酸 陽性菌は深部まで紫色になる 陰性菌は深部が黄色にとどまる  
インドール産生性 インドール試薬滴下後、陽性菌は表面が赤色になる 陰性菌は無変化  
運動性 陽性菌は全体が発育により混濁する 陰性菌は穿刺線のみ発育する
- ※使用期限: 製造日より4ヶ月(外箱に記載)、冷蔵保存(4℃~9℃)