

# 滅菌採水ボトル(サンプリングボトル)

～目盛付の広口タイプで採水がしやすい！！～

**特徴**


- 液体・固体・粉体など様々な検体のサンプリングでご使用いただけます
- 広口のスクリューキャップ式容器で検体が入りやすいです
- 100ml・200ml はハイポ入り(チオ硫酸ナトリウム)もごございます
- 目盛付き  
100ml は 10ml ごと 200ml は 25ml ごと
- 個包装で簡単に開封できるノッチ付き

**使用方法**

- 蛇口から採水する場合、5 分間放流して下さい。
- キャップの内側やボトルの上側に指が触れないようにし、採集後、閉める際も触れないようにして下さい。
- 採水後速やかに検査して下さい。直ちに検査できない場合は、冷暗状態になるべく早く検査をして下さい。



ノッチ拡大図

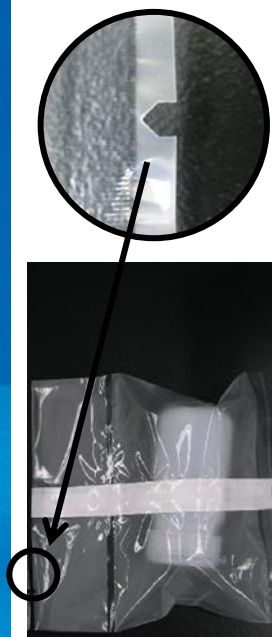

**製品仕様**

品番	014-20121EB	014-20221	014-20121	014-21121EB	014-21221	014-21121
容量	100ml			200ml		
入数	200 本入			150 本入		
内容物	無	ハイポ (チオ硫酸ナトリウム)	無	無	ハイポ (チオ硫酸ナトリウム)	無
価格	¥20,600- (@¥103-) 別途消費税	¥24,600- (@¥123-) 別途消費税	¥20,600- (@¥103-) 別途消費税	¥19,800- (@¥132-) 別途消費税	¥23,850 (@¥159-) 別途消費税	¥19,800- (@¥132-) 別途消費税
材質	本体:ポリエチレン キャップ:ポリプロピレン			本体・キャップともにポリエチレン		
滅菌方法	電子線滅菌		EOG 滅菌	電子線滅菌		EOG 滅菌
送料	弊社負担					

電子線滅菌の滅菌証明書を提出可能です。サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために  
直販のブランド  
ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

Full-Steri

0120-82-4929

アテクト 採水ボトル



検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1  
TEL 0748-20-3535  
FAX 0748-25-7171  
URL <http://www.atect.co.jp/>  
E-mail biosales@atect.co.jp