

ストマッカー用袋


～検体と希釈水を混和する際に使用する滅菌袋です～

ご使用方法


1. 検体を秤量します



2. 希釈水と検体をストマッカー用袋に入れて混ぜます

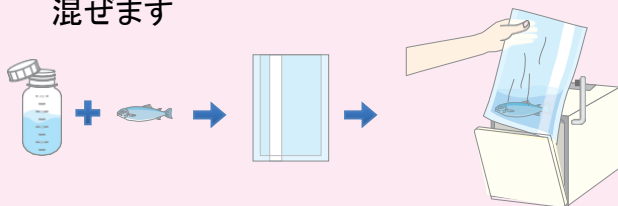

※フィルター付ストマッカー用袋の場合

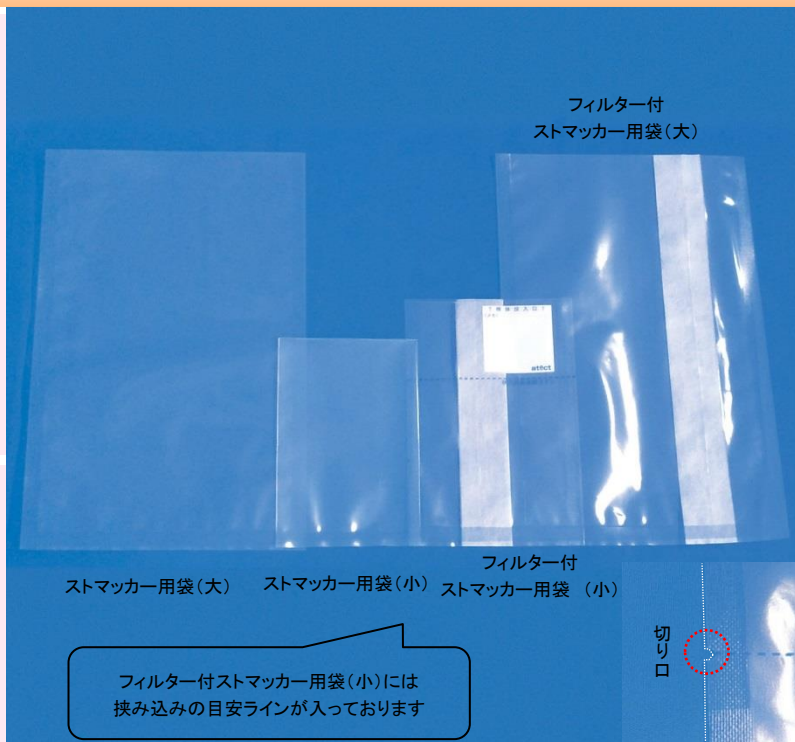サンプルを処理した後、
切り口を開けて
検液を採集しますフィルター付ストマッカー用袋(小)には
挟み込みの目安ラインが入っております

特徴

- フィルター付ストマッカー用袋には切り口が付いているので、容易に開封できます。
- チャック袋で保管できますので、必要な枚数だけお使いいただけます。
- フィルター付ストマッカー用袋(小)は検体投入口に書き込みができます。

製品仕様

品名	ストマッカー用袋(大)	ストマッカー用袋(小)	フィルター付 ストマッカー用袋(小)	フィルター付 ストマッカー用袋(大)
切り口	無し		有り	
品番	061-11200	061-11300	061-21013	061-21001
サイズ	30cm×19cm	15cm×11cm	12cm×18cm	30cm×19cm 厚み 0.065mm
入数	1000 枚/箱 (20 枚包装×50 袋)		500 枚/箱 (5 枚包装×100 袋)	500 枚/箱 (20 枚包装×25 袋)
材質	ナイロン/ポリエチレン			
滅菌方法	ガンマ線滅菌			
価格	¥14,000- (@¥14-/枚) 別途消費税	¥14,000- (@¥14-/枚) 別途消費税	¥9,750- (@¥19.5-/枚) 別途消費税	¥13,500- (@¥27-/枚) 別途消費税
送料	弊社負担			

少数での販売も行っております。詳しくはお問合せください。
サンプルをご用意しております。お申しつけください。全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト ストマッカー用袋

検索



株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp