

Product Information

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri


セレウス菌用

生培地卵黄加NGKG寒天

～生培地(培地分注済みシャーレ)のご案内～

- 検出可能な菌:** セレウス菌
- 培 養 条 件:** 35℃±2℃ 21±3 時間
- 判 定:**
培地がピンクに変色しコロニーの周辺に白濁した卵黄反応が見られるコロニー

- 特 徴:**
本培地は主に土壌に生息しているセレウス菌の検出培地です。セレウス菌は生育条件が悪化すると芽胞を形成します。この状態になりますと温度や薬剤に強い耐性を持ち、生育条件が良好になると再度活動を再開します。カット野菜や小麦粉などの検査によく用いられますが、近年冷凍食品の検査にも導入されております。

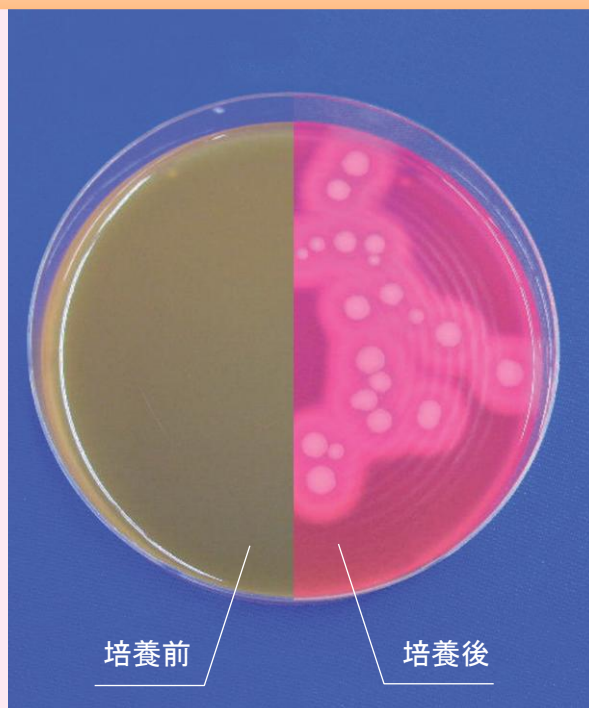

組 成

(g/L)

ペプトン	1.0g
酵母エキス	0.5g
塩化ナトリウム	4.0g
グリシン	3.0g
硫酸ポリミキシン B	5万単位
フェノールレッド	0.025g
寒天	18.0g
卵黄	20ml

pH=6.8±0.2

アテクト 生培地

検索

● 製品仕様

品 番	053-13010	053-13110
品 名	セレウス菌用・ 生培地卵黄加NGKG寒天培地	
入 数	100枚 (10枚×10袋)	50枚 (10枚×5袋)
価 格	お問い合わせください	お問い合わせください
使用期限	製造日より6ヶ月	
保存方法	4℃～8℃(冷蔵保存)	
送 料	弊社負担	

* サンプルをご用意しております。お申しつけ下さい

* 10枚単位での販売も行っております。ご連絡下さい。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト 検査

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275-1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <https://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp